

Information til vores kunder

Lynge, 6. juli 2016

## Produktændring **Tracheostomi nakkeband**

I modtager dette brev, fordi I køber lyseblå **Tracheostomi nakkeband** fra Mediplast Kendan A/S, og fordi at disse produkter er blevet produktopdateret.

Det drejer sig om disse artikelnumre:

- 400005011
- 400005033
- 400005044
- 400005033/5N (specialprodukt som er 40005033 uden logo-print)


Der sker **INGEN** ændringer på artikelnumre, pakningsstørrelse, produktmateriale eller størrelse på produktet.

Producenten oplyser, at nakkebandene nu udføres i en mere **soft** og **hudvenlig** konstruktion.

Ændringen er at finde på nakkeband produceret efter den 1. september 2016.

Kontakt gerne den lokale produktspecialist eller Mediplast Kundeservice, hvis I har spørgsmål til nakkebandene.

Venlig hilsen  
Mediplast Kendan A/S

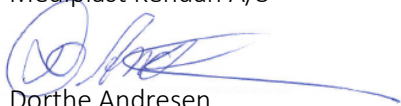

Dorthe Andresen  
Produktchef



## Tracheostomi nakkeband- engangs

Nakkebandene anvendes til at fastholde positionen af en tracheostomi tube, der er taget i brug. I funktion vil båndene forhindre, at tuben utilsigtet falder ud.

Båndene er med bløde kanter, og materialet er ikke fleksibelt i længderetningen. Længderetningen kan justeres i længden.

### Materialer

Kontaktflader- Velour Polyurethan skum (PUR) og Polyamid Velour (PA).

Velcrolukning- Polyethersulfone (PES) og Polypropylene (PP).

Indeholder IKKE: Latex og PVC.

### Brugervejledning


1

Løsn begge velcro-tilhæftninger fra nakkebandet og placer nakkebandet bag patientens nakke.



2

Før hver velcro-tilhæftning ind gennem hver sin flange på tracheostomi tuben.

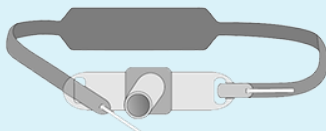

3

Pres hver velcro-tilhæftning ned på nakkebandet.



**VIGTIGT!** Kontroller omhyggeligt at tilhæftningerne er lukkede og fæstner korrekt.

Varenummer	Produkt	Længde	Antal/æske
400005011	Tracheostomi nakkeband til baby/barn, blå	35,5cm	10 stk.
400005033	Tracheostomi nakkeband til barn/voksen, blå	47cm	10 stk.
400005044	Tracheostomi nakkeband XL til voksne, blå	52cm	10 stk.

