


Diatermipencil "ProPencil"

med integreret røgsug og teleskopfunktion

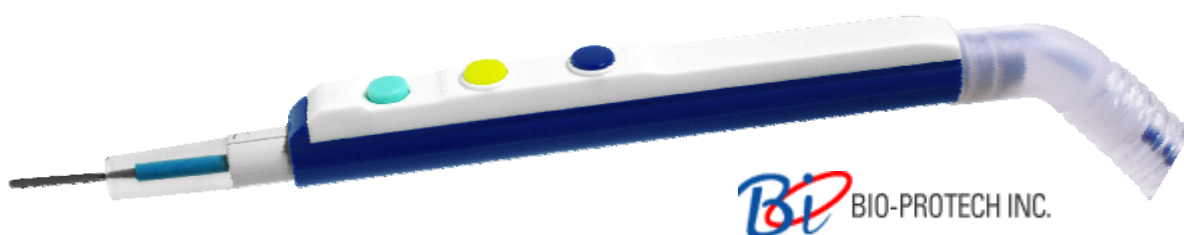

Den monopolare pencil (ProPencil) har indbygget røgsug og mulighed for forlængelse (teleskop), hvor både elektrode og røgsug følger med ud og justeres i længden efter behov. ProPencil er et engangsinstrument og leveres sterilt pakket.

ProPencil passer til alle diatermiapparater med standard monopolarstik, da den har 3-pin stik. ProPencil leveres med en coated spatelektrode. ProPencil kan anvendes til både koagulering og skæring i alle specialer. Koblingsdiametere til elektroden er 2,4 mm Ø i skaftet og dermed en standard diameter. Elektroden kan let udskiftes med andre engangselektroder med 2,4 mm Ø. Røgsugslangen har en 22 mm Ø konnektorer til røgsugsapparatet. Forlængelsen af elektrode og røgsug aktiveres ved at holde den sorte knap nede, og elektrode og røgsug trækkes ud til den ønskede længde, hvorefter den sorte knap slippes. Herefter sikres det, at den udtrukne del sidder i "hak" og sidder fast i den ønskede position.



Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
EvBN	ProPencil	10/40
EvBNH	Propencil med hylster	10/40

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Produkt: Sterilt engangsprodukt. CE-mærket klasse IIb.
 Materiale: Elektrode: Rustfrit stål, Hylster: PE
 Blå elektrode beskyttelse: Silikone
 Håndtag + teleskop: ABS
 Harmonikaslange: EVA/POE
 Kobber overtrukket PVC ledning
 Pakning: Produkt indpakning: Tyvek blister
 Æske +Transportindpakning: Genanvendelig pap

